

ESTEC EM II PLUS PASTE B

CE-CONFORM REGULAMENTULUI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (PCL) & 2020/878

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**1.1 Element de identificare a produsului**

Denumire produs ESTEC EM II PLUS PASTE B

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicateUtilizare identificată **【Dispozitivele Medicale】** Cement rășinic adeziv. Doar pentru profesioniști dentare.

Utilizează sfătuiri să nu Utilizați numai pentru aplicații destinate.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător

Identificarea companiei Tokuyama Dental Corporation

Adresa producătorului 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

Cod postal 110-0016

Telefon: +81-3-3835-2261

Fax +81-3-3835-2265

e-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>

Furnizor

Identificarea companiei Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Adresa furnizorului Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy

Cod postal 36066

Telefon: +39-0444-659650

Fax +39-0444-750345

e-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Număr telefon de urgență +402 212 106 282

Contactați TOXAPEL - Paediatric Poison Centre
Emergency Clinical Hospital for Children Grigore Alexandrescu
Boulevard Iancu de Hunedoara 30-32, Bucharest
Număr de telefon: +402 1 210 6282 / +402 1 210 6183
Număr de telefon de urgență: +402 212 106 282

Spitalul de Urgență Floreasca

Adresă Institutul Național De Sanătate Publică Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5,
București, direcție generală {at} insp.gov.ro, 050463 România.

Număr telefon de urgență +40 2 1 318 3606 (0800 - 1500)

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL) Skin Irrit. 2 :Provoacă iritarea pielii.
Skin Sens. 1 :Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Eye Irrit. 2 :Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Aquatic Chronic 2 :Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.**2.2 Elemente pentru etichetă**Denumire produs În conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL)
ESTEC EM II PLUS PASTE B
(Conține:
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl)oxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate;
2,2'-etilendioxidietyl dimetacrilat;
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate;
peroxid de dibenzoil)

Pictogramă (pictograme) de pericol



GHS07



GHS09

Cuvânt (cuvinte) de avertizare

Frază (fraze) de pericol

Atenție

H315: Provoacă iritarea pielii.

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Frază (fraze) de Precauție

P261: Evitați să inspirați vaporii.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.

P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

P501: A se elimina în conformitate cu conținutul de stat locale, sau de legislația națională.
Neaplicabil.

Identificator unic de formulă (UFI):

2.3 Alte pericole

De evaluare a PBT : Acest produs nu conține substanțe clasificate ca fiind PBT sau vPvB.
Proprietăți de perturbator endocrin : 128-37-0 (Sub evaluare) (<0.1%)

2.4 Informații suplimentare

Pentru text complet sau declarația de H/P vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE**3.1 Substanțe**

Neaplicabil.

3.2 Amestecuri

COMPONENTA/ COMPONENTE RISCANT(E)	Nr. CAS	Nr. EC / REACH Nr de înregistrare	W/W %	Frază (fraze) de pericol	Pictogramă (pictograme) de pericol
SILICA-ZIRCONIA FILLER	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Neclasificat	Niciunul
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-etilendioxidietil dimetacrilat	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Neclasificat	Niciunul
peroxid de dibenzoil	94-36-0	202-327-6	<1	Org. Perox. B H241 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS07 GHS09
dl-bornane-2,3-dione	10373-78-1	233-814-1	<0.5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
2,6-di-terț-butil-p-cresol	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09
mequinol	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07

COMPONENTA/ COMPONENTE RISCANT(E)	Nr. CAS	Limitele de concentrație specifice	Factor de M	ETA
peroxid de dibenzoil	94-36-0		Aquatic Acute 1: 10 Aquatic Chronic 1: 10	
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
mequinol	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

Nu conține substanțe vPvB neclasificate.

Nu conține nicio substanță cu limită de expunere la locul de muncă specificată de către o Uniune.

Pentru text complet sau declarația de H/P vezi secțiunea 16.

ESTEC EM II PLUS PASTE B**SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR****4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

General	Scoate la aer curat imediat. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
Inhalare	Scoate la aer curat imediat. Mențineți-l cald și liniștit. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
Contact cu pielea	Spălați zona afectată cu multă apă și săpun. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
Contact cu ochii	Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
Ingerare	Clătiți gura. Dați multă apă de băut. Dacă apar semne / simptome în continuare, pentru a primi îngrijiri medicale.
Sfat pentru cei ce acordă primul ajutor	Salvatorii trebuie să ia măsuri de precauție corespunzătoare pentru a evita să fie afectați ei înșiși.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Provoacă o iritare gravă a ochilor.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există recomandări specifice. Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Mijloace de Stingere Corespunzătoare	Spumă rezistentă la alcool. Bioxid de carbon . Ceață apoasă sau pulbere uscată .
Mijloace de stingere necorespunzătoare	Nici o informație disponibilă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

În caz de incendiu: Se poate forma gaz toxic.
Arderea sau descompunerea termică va emana vapori toxici. Gaze/vapori toxici : Monoxid de carbon, Dioxid de carbon

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Evitați să inspirați gazul. Evitați să inspirați vaporii. Mențineți împotriva vântului. Recipientele portabile trebuie mutate dacă acest lucru este posibil și nu implică riscuri. Mențineți reci containerele expuse prin stropire cu apă. Nr foc deschis, nu scânteii și nu fumat. Pompieri trebuie să poarte echipament de protecție complet, inclusiv auto-aparat de respirație.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Purtați echipament de protecție ca în secțiunea 8. Nr foc deschis, nu scânteii și nu fumat.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu lăsați să intre în canalizări, șanțuri sau cursuri de apă.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Eliminați sursele de aprindere. Nr foc deschis, nu scânteii și nu fumat. Asigurați o ventilație adecvată. A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile. Adsorbiți scurgerile pe nisip, pământ sau orice material adsorbant potrivit. Plasați într-un container adecvat. Evitați a alerga off la căile navigabile și de canalizare. Nu utilizați unelte care produc scânteii.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi de asemenea Secțiunea 8, 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

A se folosi numai în spații bine ventilate. Evitați să inspirați vaporii. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Purtați echipament de protecție ca în secțiunea 8. A se spăla mâinile înaintea pauzelor și după locul de muncă. Spălați zona contaminată a corpului cu săpun și apă proaspătă. Luați toate măsurile de precauție pentru a evita amestecul cu combustibili.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.

Temperatura de pastrare

0 - 10°C

Durata de pastrare

Stabil în condițiile de depozitare prescrise.

Materiale incompatibile

Materiale inflamabile sau combustibile. Agent puternic de reducere.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

ESTEC EM II PLUS PASTE B

【Dispozitivele Medicale】 Ciment rășinic adeziv. Doar pentru profesioniști dentare.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**8.1 Parametri de control**

8.1.1 Limite de expunere profesională Nu este atribuită limita de expunere profesională.

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare A se asigura ventilație adecvată, inclusiv evacuare locală corespunzătoare. Să se asigure ventilarea adecvată pentru a fi siguri că limita de expunere profesională nu este depășită.

8.2.2. Echipamentul individual de protecție

	Protejarea ochilor	Purtați de protecție a ochilor, cu protecție laterală (EN ISO 16321-1). Chimice rezistente la uzura ochelari de protecție ochi. Ochelari de protecție.
	Protecția pielii	Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși: Mănuși impermeabile (EN 374). Timp Breakthrough din materialul de mănuși: se referă la informațiile furnizate de către producător mănuși ". Mănuși impermeabile, rezistente la substanțe chimice, conforme cu un standard aprobat trebuie să fie purtate în cazul în care o evaluare a riscului arată că este posibil contactul cu pielea. Mănuși ar trebui să fie schimbat în mod regulat pentru a evita problemele de permeabilitate. Purtați îmbrăcăminte protectoare adecvată. (Evitați contactul cu pielea.)
	Protecția respiratorie	Se purta un aparat respirator adecvat în cazul în care ventilația nu este suficientă pentru a menține concentrația de vapori de solvent sub valorile limită la locul de muncă.
	Pericole termice	În condiții de incendiu trebuie purtat un aparat de oxigen autonom și îmbrăcăminte protectoare adecvată.
	Măsuri de igienă	A se asigura o ventilație adecvată, inclusiv un sistem corespunzător de extracție locală pentru a fi siguri că limita de expunere profesională nu este depășită. O facilitate de spălare / apă pentru ochi și piele în scopuri de curățare ar trebui să fie prezente. Scoateți imediat hainele contaminate. După contactul cu pielea spălați imediat cu multă apă și săpun. Spălați-vă mâinile înainte de a mânca, bea sau fumat. A se spăla mâinile înaintea pauzelor și după locul de muncă. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

8.2.3. Controlul Expunerii Mediului

Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Starea fizică	pastă. (Lichid.)
Culoare	Limpede
Miros	Caracteristic
Punctul de topire/punctul de înghețare	Nu este cunoscut.
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Nu este cunoscut.
Inflamabilitatea	Nu este cunoscut.
Limita inferioară și superioară de explozie	Nu este cunoscut.
Punctul de Aprindere	Neaplicabil.
Temperatura de autoaprindere	Nu este cunoscut.
Temperatura de descompunere	Nu este cunoscut.
pH	Nu este cunoscut.
Vâscozitatea cinematică	Nu este cunoscut.
Solubilitate	Solubilitatea (în apă) : Nu este cunoscut. Solubilitatea (în alte substanțe) : Nu este cunoscut.
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	Nu este cunoscut.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Presiunea de vapori	Nu este cunoscut.
Densitatea și/sau densitatea relativă	Nu este cunoscut.
Densitatea relativă a vaporilor	Nu este cunoscut.
Caracteristicile particulei	Nu este cunoscut.

9.2 Alte informații

Niciunul.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE**10.1 Reactivitate**

Nici unul anticipat. A se vedea celelalte subsecțiuni ale acestei secțiuni pentru mai multe detalii.

10.2 Stabilitate Chimică

Stabil în condițiile de depozitare prescrise.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu este cunoscut.

10.4 Condiții de evitat

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se feri de lumina solară directă.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale inflamabile sau combustibile. Agent puternic de reducere.

10.6 Produri de descompunere periculoși

Arderea sau descompunerea termică va emana vapori toxici.
Gaze/vapori toxici : Monoxid de carbon, Dioxid de carbon

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE**11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Toxicitatea acută - Ingerare	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitatea acută - Contact cu pielea	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitatea acută - Inhalare	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Corodarea/iritarea pielii	Metoda de calculare : Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Metoda de calculare : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
De date sensibilizarea pielii	Metoda de calculare : Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Datele de sensibilizare respiratorie	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Mutagenitatea celulelor germinative	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Cancerigenitatea	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. peroxid de dibenzoil (94-36-0) Clasificare IARC: Grupa 3. NTP cancerigenitate: Nelistat . 2,6-di-terț-butil-p-cresol (128-37-0) Clasificare IARC: Grupa 3. NTP cancerigenitate: Nelistat .
Toxicitatea pentru reproducere	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Alăptării	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	Metoda de calculare : Neclasificat.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată	Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Pericolul prin aspirare	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

11.2 Informații privind alte pericole

Cale/Căi de introducere	Piele , Ochi , Ingerare , Inhalare , Efectele sanatații: A se vedea secțiunea 4.2.
Proprietăți de perturbator endocrin	128-37-0 (Sub evaluare) (<0.1%)

ESTECEM II PLUS PASTE B**SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE****12.1 Toxicitatea**

Metoda de calculare :Toxic pentru viața acvatică. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Toxicitatea - Aquatic nevertebrate Lipsa datelor.

Toxicitatea - Pești Lipsa datelor.

Toxicitatea - Alge Lipsa datelor.

Toxicitatea - Compartimentul Sedimentele Lipsa datelor.

Toxicitatea - Compartimentul terestru Lipsa datelor.

12.2 Persistența și degradabilitatea

Nu este cunoscut.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu este cunoscut.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu este cunoscut.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest produs nu conține substanțe clasificate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

128-37-0 (Sub evaluare) (<0.1%)

12.7 Alte efecte adverse

Nu este cunoscut.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

A se elimina în conformitate cu conținutul de stat locale, sau de legislația națională. Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Evacuarea de la site-ul refuza adecvate. Nu lăsați să intre în canalizări, șanțuri sau cursuri de apă. Recipientele goale sau garniturile acestora pot reține urme de reziduuri ale produselor și, prin urmare, să fie potențial periculoase.

13.2 Informații suplimentare

Evacuarea trebuie să fie în concordanță cu legislația locală, de stat sau națională.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT**14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**

Nr. ONU 3082

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea corectă ONU pentru expediție ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Conține: peroxid de dibenzoil)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR/RID

Clasa ADR/RID 9

IMDG

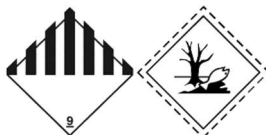
Clasa IMDG 9

Clasa OACI/IATA

OACI/IATA Clasa 9

Etichete

Etichete 9

**14.4 Grupul de ambalare**

Grupul de ambalare III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Pericole pentru mediul înconjurător ADR/RID: Periculoase Pentru Mediu
IMDG: Poluant marin

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Precauții speciale pentru utilizatori Nu este cunoscut.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu există informații disponibile

ESTECEM II PLUS PASTE B

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanțe sau amestecul în cauză

Regulament European - Autorizațiile și / sau restricții privind utilizarea

Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării	Nelistat
REACH: ANEXA XIV lista substanțelor care fac obiectul autorizării	Nelistat
REACH: ANEXA XVII restricțiile la producerea, introducerea pe piață și l utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și l articole periculoase	Nelistat
Planului comunitar de acțiune flexibil (CoRAP)	2,6-di-terț-butil-p-cresol (128-37-0), dioxid de silicon (7631-86-9), (1-(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate (41637-38-1)
Regulamentul (UE) NR. 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți	Nelistat
Regulamentul (CE) NR. 2024/590 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon	Nelistat
Regulamentul (CE) NR. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc	Nelistat
Directivei 93/42/CEE a Consiliului.	Acest produs este un dispozitiv medical definit în Directiva 93/42 / CEE (MDD), care este invaziv sau utilizat în contact fizic direct cu corpul uman și, prin urmare, este scutit de cerințele de clasificare și etichetare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP; articolul 1, paragraful 5). Deși nu este necesar, produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

Regulamente naționale

Altele

Nu este cunoscut.

15.2 Evaluarea Securității Chimice

Nu a fost efectuată o evaluarea securității chimice REACH.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Următoarele secțiuni conțin texte revăzute sau afirmații noi:

Aceasta este prima ediție.

Data emiterii :

01-09-2025

Ediție revizuită:

1

LEGENDĂ

Pictogramă (pictograme) de pericol



GHS07



GHS09

Clasificare de pericol

GHS08: GHS: Pericol pentru sănătate
Org. Perox. B : Peroxid organic, CategorieB
Acute Tox. 4 : Toxicitatea acută, Categorie 4
Skin Irrit. 2 : Corodarea/iritarea pielii, Categorie 2
Skin Sens. 1 : Sensibilizarea pielii, Categorie 1
Skin Sens. 1B : Sensibilizarea pielii, Categorie 1B
Eye Irrit. 2 : Lezarea gravă/iritarea ochilor, Categorie 2
STOT SE 3 : Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică, Categorie 3
STOT RE 2 : Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere repetată, Categorie 2
Aquatic Acute 1 : Periculoase pentru mediul acvatic, Acut., Categorie 1
Aquatic Chronic 1 : Periculoase pentru mediul acvatic, Cronic., Categorie 1
Aquatic Chronic 2 : Periculoase pentru mediul acvatic, Cronic., Categorie 2

ESTECEM II PLUS PASTE B

Frază (fraze) de pericol	Aquatic Chronic 3 : Periculoase pentru mediul acvatic, Cronic., Categorie 3 H241: Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire. H302: Nociv în caz de înghițire. H315: Provoacă iritarea pielii. H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Frază (fraze) de Precauție	P261: Evitați să inspirați vaporii. P264: Spălați-vă pe mâinile și pielea expusă cu grijă după utilizare. P272: Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. P273: Evitați dispersarea în mediu. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P321: Tratament specific (a se vedea Sfaturi medicale de pe această etichetă). P332+P313: În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. P362+P364: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P391: Colectați scurgerile de produs.
Acronime	P501: A se elimina în conformitate cu conținutul de stat locale, sau de legislația națională. ADN : Acordul european privind transportul internațional pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase ADR : Acordul European Privind Transportul Rutier Internațional al Mărfurilor Periculoase ETA : Estimări ale Toxicității Acute CAS : Chemical Abstracts Service CLP : Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor DNEL : Derivate fără efecte la nivel CE : Comunitatea Europeană EINECS : Inventarul European Al Substanțelor Chimice Existente Introduse Pe Piață IATA : Asociația Internațională de Transport Aerian IBC : Recipient mare pentru vrac OACI : Organizația Internațională a Aviației Civile IMDG : Maritim Internațional al Mărfurilor Periculoase LTEL : Limita de expunere pe termen lung PBT : Persistente, Bioacumulabile și Toxice CEPZ : De concentrație previzibilă fără efecte REACH : Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice RID : Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase STEL : Limita de expunere pe termen scurt STOT : Organ țintă specific de toxicitate ONU : Organização das Nações Unidas vPvB : foarte Persistente și foarte Bioacumulabile
Referințele cheie din literatura de specialitate și sursele datelor utilizate pentru întocmirea SDS	Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL)
Sfat de formare	Asigurați că lucrătorii calificați sunt instruiți pentru a minimiza expunerea. Numai personalul calificat trebuie să folosească acest material.
Condiții legale	Aceste informații se referă numai la materialul specific desemnat și nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat în combinație cu orice alte materiale sau în orice proces. Astfel de informații sunt, în cea mai bună cunoaștere și credință a companiei, exacte și sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o condiție, garanție sau reprezentare nu se face pentru exactitatea, siguranța sau completitudinea lor. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cât de adecvate sunt aceste informații pentru uzul său propriu.

ESTECEM II PLUS PASTE B